

Попередження

Зверніться до Вашого стоматолога для консультації протягом перших трьох місяців використання цього продукту.

Не використовувати в наступних випадках:

- Більше трьох місяців без консультації стоматолога.
- Більше 8 годин на день.
- Як спортивну захисну капу. Ця продукція призначена для протидії вертикальному тиску, але не захищає від ударної дії.
- Якщо Вам не виповнилося 18 років.
- Якщо у Вас немає декількох зубів або є розхитані зуби.
- При болю в нижньощелепному суглобі (ТМС), діагностованому стоматологом, або при хрускоті у щелепах.
- При болю, викликаному внаслідок скреготінням зубами, або при зубному або щелепному болю іншого походження.
- Якщо у Вас є зубні імплантати, або Ви носите зубні протези, брекети чи інші ортодонтичні пристрої.

Перед використанням капи проконсультуйтеся зі стоматологом якщо у Вас є:

- Серйозні проблеми зі здоров'ям або серйозні порушення дихальної функції.
- Виразки в ротовій порожнині, кровоточивість ясен або будь-які захворювання ясен.
- Незапломбовані зуби або пломби, що випали.
- Труднощі при жуванні, щелепний, зубний або лицьовий біль.
- У Вас немає одного або більше зубів.

Припиніть використання і проконсультуйтеся зі стоматологом, якщо:

- У Вас розвиваються виразки в ротовій порожнині, кровоточивість ясен або будь-яка інша реакція у ротовій порожнині.
- У Вас розвиваються щелепний біль, зубний біль, вушний біль, головний біль, оніміння шиї або хрускіт в суглобах при використанні цього продукту.
- Зазначені симптоми зберігаються більше місяця використання.
- Капа легко випадає у Вас з рота.
- Капа заважає дихати, створює дискомфорт або викликає блювотні позиви.
- Через декілька хвилин після зняття капи Ви спостерігаєте зміну прикусу, яке не проходить.

Користувачі можуть відчувати задуху або нудоту під час використання цього продукту. Якщо це сталося, припиніть користування та зверніться за медичною допомогою.

Відвідуйте стоматолога кожні 6 місяців.

Цей продукт не містить бісфенолу А та латексу.



Вироблено для: DenTek Орал Кеар Інк., Мерівілл, Теннесси 37801
©2018 DenTek Орал Кеар Інк. Зроблено в США 0813-60007381

Заміна

Заміна Вашої зубної капи

Всі зубні капи з часом вимагають заміни. Будь ласка, перевіряйте Вашу зубну капу на знос щомісяця. Термін Вашої зубної капи Комфортної посадки залежить від того, як часто і з якою силою відбувається у Вас скрегіт зубів.

DenTek

Ознайомтеся з повним асортиментом продукції компанії DenTek на сайті офіційного представника в Україні swisstrade.com.ua

Також рекомендуємо



Про Вашу зубну капу

Розроблена для комфортного захисту від нічного скреготу зубів або Бруксизму:

- ✓ Демпфування і розділення зубів
- ✓ Зниження пошкодження зубів і запобігання шуму від скреготу зубами

Зубна капа DenTek Комфортна посадка призначена для установки на НИЖНІ зуби БЕЗ необхідності її нагрівання та формовки. На кожній стороні зубної капи передбачені 5 позицій для регулювання її положення.

Рис. 1А



Рис. 1В

Рис. 1С

Початок

Для найкращих результатів


- **НЕ ОДЯГАЙТЕ обидві зубні капи одночасно.**
- Прочитайте та дотримуйтеся інструкції перед підгонкою зубної капи DenTek Комфортна посадка.
- Якщо Вам потрібна допомога, відвідайте www.swisstrade.com.ua або зателефонуйте за тел. 0 800 500 362 з 8:00 до 17:00 в робочий час і один з наших навчених фахівців Вам допоможе.
- Вам може знадобитися деякий час, щоб звикнути до носіння зубної капи, тому надягайте її за годину до сну.

Підгонка Вашої зубної капи

- Сполосніть зубну капу у теплій воді.
 - Розпочніть з тестової підгонки Вашої зубної капи. Від самого початку капа відрегульована на мінімальну позицію – 1, як показано на Рис. 1В.
- Помістіть капу на Ваші нижні зуби і прикусіть, слідкуючи за тим, щоб капа вкривала принаймні один корінний зуб, але не виходила за Ваш останній корінний зуб.
- * Використовуйте дзеркало, щоб впевнитись, що подушечка капи вкриває принаймні один корінний зуб.
 - Якщо зубна капа не вкриває принаймні один корінний зуб, дивіться інструкцію з регулювання.

Як виконати підгонку капи?

Регулювання Вашої зубної капи

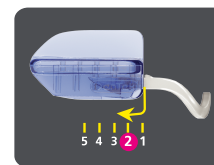

ПРИМІТКА: НЕ намагайтеся змістити подушечки для корінних зубів далі 1 і 5 позиції. НЕ згинайте занадто фронтальний обід, так як це може привести до його деформації.

Готова до використання



Процес підгонки зубної капи завершений, і використання зубної капи має бути комфортним для Вас.

Чищення і догляд

Після кожного використання, чистіть свою капу зубною пастою та/або ополіскувачем для ротової порожнини. Ніколи не промивайте зубну капу гарячою водою, так як це може змінити її форму.

Питання або коментарі

Зателефонуйте нам! 0800 500 362



Відвідайте нас! www.swisstrade.com.ua

Лайкніть нас! [Facebook.com/DenTek](https://www.facebook.com/DenTek)

Дізнайтеся більше про зубні капи. Відскануйте цей код за допомогою QR-рідера на Вашому смартфоні.



Не потребує кип'ятіння

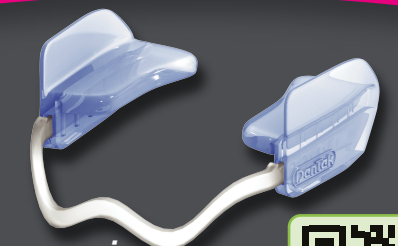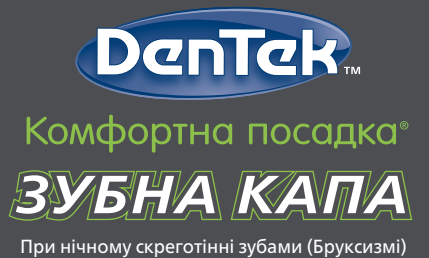

Інструкція по підгонці



YouTube

Перегляньте покрокові інструкції по підгонці капи. Відскануйте цей код Вашим смартфоном за допомогою QR-рідера або зайдіть на вебсайт www.youtube.com/dentekoralcare